

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

⚡ Dermatoscope HEINE® NC2

Le dermatoscope polyvalent

NEW!

LED NOW

LED NOW IN HEINE QUALITY.



Ce dispositif est à recommander sans aucune hésitation pour les besoins du médecin généraliste! Il permet de délimiter plus précisément le diagnostic des lésions cutanées non univoques (par ex. verrues plantaires, corps étrangers intradermaux/ sous-cutanés comme les échardes/débris de verre ou la gale). Je l'utilise tout le temps.

Dr. med. Timm Wiecken, médecin spécialisé en médecine générale et urgentiste, Herrsching, Allemagne



Le nouveau HEINE NC 2 est un dermatoscope à épiluminescence standard gradué à grossissement 10x. Il suffit de retirer l'embout de contact pour transformer le NC 2 en un dermatoscope sans contact avec un grossissement 6x.

✓ **Image claire, détaillée et sans reflet**

Écart immédiatement correct par rapport à l'objet lorsque l'embout de contact est en place (grossissement 10x), graduations intégrées pour une estimation réaliste de la taille.

✓ **Examen efficace sur une grande surface**

Grossissement 6x sans embout de contact à fixation magnétique.

✓ **Champ de vision particulièrement large**

Optique de précision HEINE avec diamètre de 27 mm pour des images particulièrement nettes et en haute résolution.

✓ **Rendu fidèle des couleurs réaliste**

LED en HQ – Deux fois plus clair que le modèle précédent NC 1. Lumière totalement homogène, claire et fidèle en termes de couleur pour un diagnostic précis.




✓ **Documentation photo simple**


Commande simple et rapide avec des accessoires pour Apple® iPhone® à partir de la version 5* et l'application NC2 – également en mode sans contact.

✓ **Application NC2**

Surveillance et documentation rapide et simple. Grossissement numérique jusqu'à 30x / résolution jusqu'à 12 MP** Gestion des patients, fonction intégrée d'e-mail, affectation d'informations d'image et de détails patients sur un schéma du corps.

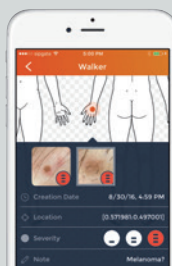

Affectation des enregistrements sur un schéma du corps

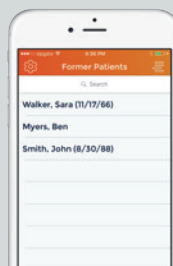

Sélection des patients existants

✓ **Toujours prêt à l'emploi**

Éclairage polarisé pour un examen immédiat sans utilisation de liquides de contact.

Il existe deux techniques pour réduire la réflexion cutanée :

1. « Éclairage à épiluminescence » directe avec liquide de contact (par ex. huile spéciale) : un liquide est appliqué entre l'embout de contact et la peau.
2. Technique de polarisation : à l'aide d'un éclairage polarisant spécial, les couches de la peau peuvent être identifiées sans liquide de contact.



Avec embout de contact



Sans embout de contact



Avec coque d'adaptation pour iPhone

Informations de commande:

Trousses de Dermatoscope NC2

Dermatoscope NC 2 (poignée USB incl.), embout de contact avec graduation, câble USB avec E4-USB bloc d'alimentation enfichable homologué pour les applications médicales, dans une mallette

Coque d'adaptateur pour iPhone à commander séparément, voir accessoires

D-841.78.120

Voir ci-dessus, mais sans embout de contact

D-842.78.120

Accessoires

Coque d'adaptation de smartphones NC 2/7 pour Apple iPhone 7	D-000.78.127
Coque d'adaptation de smartphones NC 2/6 pour Apple iPhone 6/6s	D-000.78.126
Coque d'adaptation de smartphones NC 2/5 pour Apple iPhone 5/5s/SE	D-000.78.125
Coque d'adaptation de iPod NC 2/T6 pour Apple iPod touch 6ème génération	D-000.78.124

▶ Selon vos réglementations locales, certains produits peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. Pour plus de configurations de produits et d'autres produits de qualité HEINE, rendez-vous sur www.heine.com

* Apple iPhone 7, 6/6s, 5/5s, SE ou iPod touch 6ème génération n'est pas compris dans le cadre de la livraison.

iPhone et iPod sont des marques déposées de Apple Inc., aux États-Unis et dans d'autres pays.

** avec iPhone 6s, SE et 7

